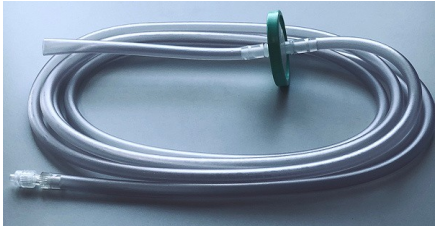



Insufflaattorisetti

Insufflaattorin letku suodattimella estää tehokkaasti hiilidiksidipulloissa esiintyvien epäpuhtauksien joutumisen kaasun mukana potilaaseen.

Estää potilaasta mahdollisesti tulevan takaisinvirtauksen saastuttamasta insufflaattoria

Tuote nro.	Pituus	Liitin insufflaattoriin	Liitin potilaspää	kpl / ltk	
9705	3 m	Kupla	Luer	35	
9706	3 m	M15 mm	Luer	35	

- Steriili, kertakäyttöinen
- Suodattimen tehokkuus 99,9999% (testauskoko 0.027 micron)
- Letku PVC ftalaatti-vapaa, suodatinkotelo PP

Savusuodatin

Steriili kertakäyttöinen savusuodatin laparoskooppisiin toimenpiteisiin.

Suodatin poistaa kirurgisessa savussa esiintyviä epäpuhtauksia; viruksia, bakteereita ja karsinogeenisiä aineita.

Tuote Nro.	Letkun pituus	Liitin	kpl / ltk
9709	50 cm	Luer	30



Materiaalit; Letku PVC, suodatinosa ABS

Aktiivihiilisuodattimen teho on 99,9999% 0,027 Mikroonin asti

Liitä Luer Trocaariin ja anna letkun ja suodattimen roikkua vapaasti.
Aktiivihiilisuodatin puhdistaa kirurgisen savun. Virtaus on säädettävissä.